

Návod k použití

XVIVO Insights™ V2.1 – mobilní
aplikace

XVIVO

Obsah

1	Popis produktu	3
1.1	Upozornění a bezpečnostní opatření	3
1.2	Účel použití	3
1.3	Zamýšlený uživatelský profil	3
1.4	Zamýšlený klinický přínos	3
1.5	Zamýšlená lékařská indikace	3
2	Podporované operační systémy	3
3	Role a definice	3
4	Návod k použití	5
4.1	Přihlášení do systému.....	5
4.2	Úprava názvu zařízení	6
4.3	Přidání/úprava uživatelů	7
4.3.1	Přidání XVIVO Admin / XVIVO Technical Support (dostupné pouze pro XVIVO Admin)	7
4.3.2	Přidat System Manager (Dostupné pouze pro XVIVO Admin a System Manager).....	7
4.3.3	Přidat System User (přístupné pouze pro System Manager)	8
4.3.4	Přidat prohlížeč Viewer Premium/Viewer	8
4.4	Vyhledání perfuzního běhu	8
4.4.1	Propojení/odpojení běhu HA s během PV (pouze zařízení Liver Assist) 10	
4.5	Oznámení	11
4.5.1	Zobrazení oznámení ze zařízení	11
4.5.2	Uživatelsky definované notifikace	12
4.6	Přidání/zobrazení poznámky o perfuzi	13
4.7	Přístup k údajům o poloze (pouze zařízení Kidney Assist Transport).....	14
4.8	Úprava informací o perfuzi	15
4.9	Odstranění běhu perfuze	15
4.9.1	Schválit žádost o odstranění (dostupné pouze pro System Manager) 16	
4.9.2	Obnovit odstraněné spuštění perfuze (dostupné pouze pro System Manager).....	16
4.10	Udělení přístupu XVIVOTEchnical Support.....	16
4.11	Stažení zprávy ve formátu PDF/Excel.....	16
4.12	Sekce nápovědy	17

Viz část "Help" 4.12 pro smluvní podmínky společnosti XVIVO Insights.

1 Popis produktu

XVIVO Insights™ je webová stránka (www.xvivoinsights.com) a mobilní aplikace používaná k monitorování hardwarových perfuzních zařízení XVIVO. Webová stránka a mobilní aplikace umožňují vzdáleně prohlížet údaje o perfuzi, viz GPS data o poloze hardwarového zařízení.

Údaje o perfuzním běhu jsou přístupné pomocí přihlašovacího jména a hesla. Data pro konkrétní spuštění lze dočasně sdílet s pracovníky společnosti XVIVO, aby bylo možné vzdáleně odstraňovat problémy.

1.1 Upozornění a bezpečnostní opatření

XVIVO Insights nenahrazuje rozhraní perfuzního zařízení. Nikdy nenechávejte perfuzní zařízení bez dozoru.

Nepoužívejte XVIVO Insights k určení kvality orgánů. To by měl posoudit transplantační chirurg.

Data zobrazená v XVIVO Insights jsou určena pouze pro účely monitorování a nesmí nahrazovat oficiální doprovodné záznamy o orgánech ani dokumentaci.

1.2 Účel použití

XVIVO Insights je webová stránka a mobilní aplikace určená pro doplňkový vzdálený monitoring stavu a fungování perfuzních zařízení XVIVO.

1.3 Zamýšlený uživatelský profil

XVIVO Insights je určen pro použití vyškolenými odborníky v profesionálním zdravotnickém prostředí. Uživatelé před použitím softwaru XVIVO Insights absolvují školení o perfuzních zařízeních XVIVO.

1.4 Zamýšlený klinický přínos

XVIVO Insights není zdravotnický prostředek a nemá žádný klinický přínos.

1.5 Zamýšlená lékařská indikace

XVIVO Insights není klasifikován jako zdravotnický prostředek a nemá zamýšlenou lékařskou indikaci.

2 Podporované operační systémy

Aplikace XVIVO Insights je k dispozici pro zařízení s operačními systémy iOS a Android. Tyto platformy poskytují nejlepší kompatibilitu a uživatelský zážitek pro přístup k funkcím aplikace.

3 Role a definice

Zařízení je:

fyzické perfuzní zařízení. Každé zařízení je zase vlastněno nebo připojeno k jednotlivému účtu kliniky/centra/ONO. Parametry viditelné na zařízení jsou uloženy interně v zařízení, dokud není dosaženo maximálního úložiště nebo

Titul: Návod k použití cs
Předmět: XVIVO Insights verze 2.1 3 (18)

dokud nejsou data odstraněna uživatelem nebo servisním personálem XVIVO. Pokud je povolena funkce XVIVO Insights, data se také průběžně nahrávají do cloudového úložného systému.

System Manager - Má plná administrátorská oprávnění v rámci společnosti:

- Přidání a odebrání System Managers a System Users zařízení registrovaného na společnost (klinika/centrum/OPO)
- Přidání a odebrání Viewers, XVIVO Admin nebo XVIVO Technical Support ke konkrétnímu běhu perfuze
- Zobrazit všechny probíhající nebo ukončené perfuze související s přístroji registrovanými na společnost
- Přidání nebo úprava dat textového pole souvisejících s jednotlivým perfuzním během
- Schválit žádost o smazání perfuzních běhů
- Žádost o obnovení smazaných spuštění
- Export dat o sérii ve formátu PDF nebo Excel

System User - Provozní role s přístupem k perfuzním datům:

- Přidání nebo odebrání Viewers, XVIVO Admin nebo XVIVO Technical Support pro jednotlivá spuštění
- Zobrazit všechny probíhající/dokončené perfuze související se zařízeními registrovanými na společnost
- Přidání nebo úprava dat textového pole souvisejících s jednotlivým perfuzním během
- Odeslat žádosti o odstranění spuštění (schváleno System Manager)
- Export dat o sérii ve formátu PDF nebo Excel

Viewer Premium - Zobrazit + exportovat:

- Zobrazení spuštění explicitně sdílené System Manager nebo System User
- Export sestav PDF nebo Excel pro povolená spuštění

Viewer – základní přístup:

- Zobrazit pouze sdílená spuštění perfuze

XVIVO Admin - Vyhrazeno pro interní použití XVIVO:

- Vytvořte novou společnost a zaregistrujte k tomuto účtu nové zařízení
- Vytvoření všech uživatelských profilů včetně XVIVO Admin, XVIVO Technical Support, System Manager, System User, Viewer Premium a Viewer


XVIVO Technical Support – role řešení potíží:

- Přístup ke zprávám o spuštění a stahování s oprávněním uděleným System Manager nebo System User

4 Návod k použití

Spodní navigační panel se skládá z pěti karet:

- Home– Přehled zařízení a stav jejich posledního připojení.
- Manage– Rozhraní pro správu uživatelských rolí, přiřazování prohlížečů a zpracování požadavků na smazání. (Dostupné pouze pro profily XVIVO Admin a System Manager)
- Data – umožňuje zobrazit data z předchozích nebo probíhajících perфуzních běhů.
- Search – Vyhledávání perфуzních běhů
- Help – Poskytuje podrobnosti o přehledech, návodech k použití, častých dotazech, odstraňování problémů a kontaktování podpory.

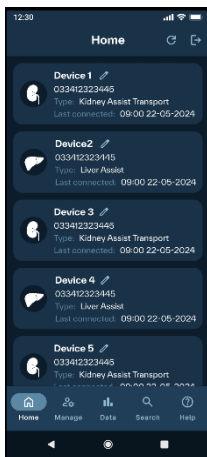

Obrázek 1 - Přehled přehledů

Přihlašovací jméno uživatele se zobrazí v pravém horním rohu rozhraní spolu s tlačítkem pro odhlášení.

4.1 Přihlášení do systému

1. Otevřete mobilní aplikaci XVIVO Insights na zařízení se systémem iOS nebo Android.
2. Zadejte přidělené uživatelské jméno a heslo
3. Klikněte na tlačítko "Login"


Heslo musí mít délku alespoň 6 znaků a musí obsahovat alespoň:

- 1 číslice
- 1 malé písmeno
- 1 velké písmeno
- 1 speciální znak

Pokud heslo zapomenete, klikněte na tlačítko "Forgot Password" a obdržíte odkaz pro obnovení registrovaného e-mailu.

Ujistěte se, že má zařízení aktivní připojení k internetu a že oprávnění aplikace umožňují přístup k síti.

Z bezpečnostních důvodů nenechávejte XVIVO Insights otevřený, když je bez dozoru. Po použití se vždy odhlaste nebo zavřete aplikaci.

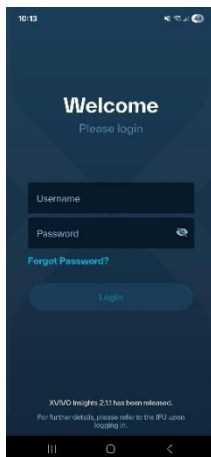


Obrázek 2 - Přihlašovací stránka

4.2 Úprava názvu zařízení

Pro přizpůsobení nebo snadnější identifikaci zařízení v rámci kliniky nebo organizace může System Manager a System User aktualizovat výchozí název zařízení v aplikaci XVIVO Insights. Postupujte následovně :

1. Vyberte kartu "Home" ve spodním navigačním panelu.
2. Ve seznamu zařízení vyberte ikonu úprav vedle názvu zařízení, které chcete aktualizovat.
3. Zadejte název nového zařízení.
4. Výběrem možnosti "Save" potvrďte změny.

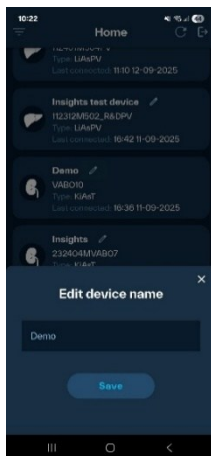

Obrázek 3 - Upravit název zařízení

4.3 Přidání/úprava uživatelů

Správa uživatelů v XVIVO Insights je funkce založená na rolích, která zajišťuje, že jsou udělovány správné úrovně přístupu na základě provozních potřeb. Tato část popisuje, jak přidat různé typy uživatelů. Chcete-li provést některou z následujících akcí, přejděte na kartu "Manage" a vyberte podkarty "Users".

4.3.1 Přidání XVIVO Admin / XVIVO Technical Support (dostupné pouze pro XVIVO Admin)

1. Přejděte do části "Manage" > "Users".
2. Klikněte na "Add User".
3. Zadejte údaje o uživateli (jméno, e-mail).
4. Vyberte roli: "XVIVO Admin" nebo "XVIVO Technical Support".
5. Přiřadte uživatele ke konkrétní společnosti.
6. Klikněte na "Add". Uživatel obdrží aktivační e-mailovou pozvánku.

Tyto role mají zvýšená oprávnění ke správě společností, registraci zařízení a přístupu k datům spuštění, pokud to dovolí firemní uživatelé.

4.3.2 Přidat System Manager (Dostupné pouze pro XVIVO Admin a System Manager)

1. V části "Manage" > "Users" klikněte na "Add User".
2. Vyplňte požadované informace o uživateli.
3. Vyberte roli: "System Manager".
4. Přiřadte uživatele ke konkrétní společnosti (přístupné pouze pro XVIVO Admin). System Manager může vytvořit dalšího System Manager pouze v rámci stejné společnosti.
5. Klikněte na "Add". Uživatel obdrží aktivační e-mailovou pozvánku.

System Managers mají plnou kontrolu nad zařízeními a provozují data pro svou organizaci a mohou spravovat ostatní uživatele.

4.3.3 Přidat System User

(přístupné pouze pro System Manager)

1. Přejděte do části "Manage" > "Users".
2. Klikněte na "Add User".
3. Zadejte údaje o uživateli (jméno, e-mail).
4. Vyberte roli: "System User".
5. Přiřaďte uživatele ke konkrétní společnosti (přístupné pouze pro XVIVO Admin). System Manager může vytvořit System User pouze v rámci jedné společnosti.
6. Klikněte na "Add". Uživatel obdrží aktivační e-mailovou pozvánku.

System Users mohou přistupovat k datům perfuze a upravovat je, ale nemohou mazat běhy ani spravovat ostatní uživatele.

4.3.4 Přidat prohlížeč Viewer Premium/Viewer

1. V dolním navigačním panelu vyberte kartu Data.
2. Vyberte "+", poté vyberte možnost "Search" a ze seznamu vyberte běh perfuze.
3. Klikněte na tři tečky vedle ikony odhlášení a vyberte možnost "Manage Viewers" > "Add New Viewer".
4. Vyberte "Add".
5. Zadejte e-mailovou adresu a přiřaďte roli Viewer nebo Viewer Premium.


Viewers přístup pouze ke sdíleným běhům, zatímco Viewer Premium mohou také exportovat data z těchto sdílených běhů. Tento přístup lze kdykoli odvolat.

4.4 Vyhledání perfuzního běhu

Lze zobrazit probíhající i dokončená spuštění. Existují tři způsoby, jak najít konkrétní perfuzní běh v aplikaci XVIVO Insights:

Možnost 1: Použití karty "Data"

1. Klikněte na záložku "Data" ve spodní navigační liště.
2. Vyberte možnost "+" a pomocí dostupných filtrů vyhledávání upřesněte. Mezi možnostmi filtrování patří:
 - Session Start date rozsah (Session start from / to)
 - Device name nebo Serial Number
 - Organ ID
3. Při použití filtrů se zobrazí seznam odpovídajících spuštění.
4. Výběrem spuštění ze seznamu otevřete jeho podrobné zobrazení.

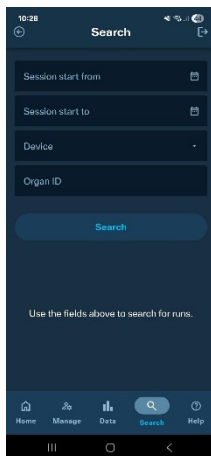


Obrázek 4 - Vyhledávání dat běhu

Možnost 2: Použití karty "Home"

1. Na kartě "Home" vyhledejte a vyberte požadované zařízení ze seznamu zařízení.
2. Zobrazí se seznam posledních perfuzních běhů spojených s vybraným zařízením.
3. Výběrem konkrétního spuštění zobrazíte jeho podrobnosti.
4. Toto zobrazení automaticky použije filtr k zobrazení spuštění za posledních 7 dní.

Zobrazí se pouze perfuzní běhy spojené se zařízeními propojenými s vaším uživatelským účtem a úrovní přístupu.

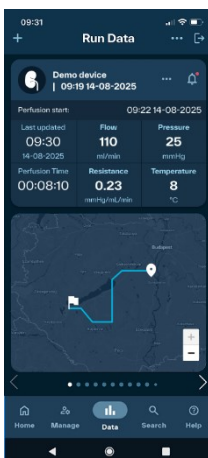

Obrázek 5 - Stránka s perfuzními daty

Titul: Návod k použití

cs

Předmět: XVIVO Insights verze 2.1

9 (18)

Možnost 3: Použití karty "Search"

1. Klikněte na kartu "Search" ve spodní navigační liště.
2. Ke zpřesnění vyhledávání použijte dostupné filtry. Mezi možnostmi filtrování patří:
 - a. Session Start date rozsah (Session start from / to)
 - b. Device name nebo Serial Number
 - c. Organ ID
3. Při použití filtrů se zobrazí seznam odpovídajících spuštění.
4. Výběrem spuštění ze seznamu otevřete jeho podrobné zobrazení.


Lze otevřít a zobrazit více perfuzních běhů. Přejetím prstem doleva nebo doprava můžete přepínat mezi otevřenými běhy. Chcete-li přidat další spuštění, klikněte na modrou ikonu "+" a postupujte podle stejných kroků jako v možnosti 1, aniž byste zavřeli stávající běh se záložkou. Chcete-li běh ukončit, klikněte na tři tečky vedle ikony zvonku v pravém horním rohu záložky perfuzního běhu a vyberte možnost "Remove run".

4.4.1 Propojení/odpojení běhu HA s během PV (pouze zařízení Liver Assist)

U zařízení Liver Assist se perfuzní data zaznamenávají odděleně ze dvou jednotek: portální žíly (PV) a jaterní tepny (HA). XVIVO Insights umožňuje uživatelům ručně propojit tyto samostatné běhy do jednoho kombinovaného zobrazení, což je užitečné pro přehled o celé relaci perfuze jater.

Propojení běhu HA s během PV:

1. Přejděte na kartu "Data".
2. Otevřete požadované PV vedení.
3. Klikněte na "Add HA".
4. Zobrazí se seznam nepropojených spuštění HA ze stejného zařízení.
5. Vybere běh HA, který odpovídá běhu PV.

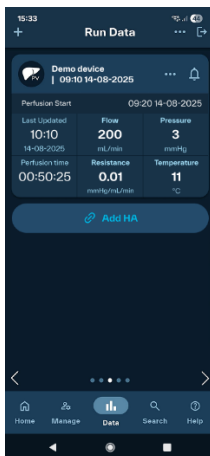

Obrázek 6 - Propojení PV běhu s HA spuštěním

Po propojení:

- Běhy PV a HA jsou zobrazeny společně ve stejném grafu perfuzních dat.
- Propojená vedení lze exportovat jako jednu kombinovanou zprávu (PDF nebo Excel).
- Poznámky a média přidaná do obou sad zůstávají viditelné samostatně.

Propojení mohou provádět pouze uživatelé s rolí System User nebo System Manager Každý PV běh může být propojen pouze s jedním HA během. V exportech a zobrazeních řídicího panelu se propojená vedení zobrazují pod sériovým číslem PV.

Chcete-li odpojit vedení HA od vedení PV, přejděte na kartu "Data" a vyberte vedení PV. V části HA klikněte na tři tečky vedle ikony zvonku a poté vyberte možnost "Unlinked paired run". Tím se odstraní spojení mezi těmito dvěma běhy a obnoví se PV jako nezávislá relace v systému.



Obrázek 7 - Odpojení PV běhu s HA spuštěním

4.5 Oznámení



XVIVO Insights nenahrazuje rozhraní perfuzního zařízení. Nikdy nenechávejte perfuzní zařízení bez dozoru.



Data zobrazená v XVIVO Insights jsou určena pouze pro účely monitorování a nesmí nahrazovat oficiální doprovodné záznamy o orgánech ani dokumentaci.

4.5.1 Zobrazení oznámení ze zařízení

Oznámení zahrnují chyby, varování a informační zprávy generované zařízením během perfuze. Jejich zobrazení:

1. Přejděte na kartu "Data".
2. Vyberte požadovaný průběh perfuze.
3. Klikněte na ikonu zvonku.
4. Červená tečka vedle ikony zvonku označuje, že jsou nepřechtená oznámení.

Titul: Návod k použití


cs

Předmět: XVIVO Insights verze 2.1

11 (18)

5. Procházejte seznamem oznámení. V horní části se zobrazí nejnovější oznámení.
6. Každá zpráva obsahuje časové razítko a úroveň závažnosti (chyba nebo upozornění).

Oznámení lze také stáhnout jako součást sestavy aplikace Excel pro offline analýzu.

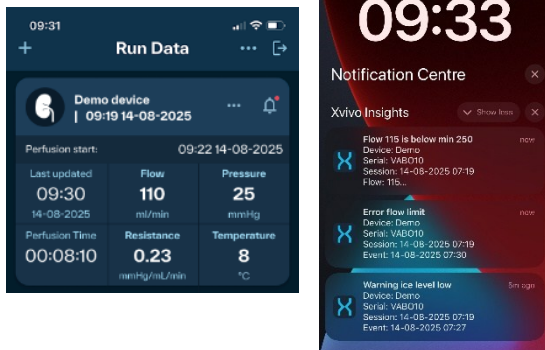

Obrázek 7 - Zobrazení oznámení

Pokud je tato možnost v nastavení zařízení povolena, push notifikace se odesílají přímo na váš mobilní telefon. Pro příjem push notifikací je nutné se přihlásit do účtu a v aplikaci musí být otevřen odpovídající perfuzní běh. Zvuk a vibrace push notifikací se řídí nastavením notifikací vašeho mobilního zařízení. Tyto výstrahy se zobrazují jako standardní systémová oznámení a poskytují souhrn události (např. "Error flow limit"). Klepnutím na oznámení se otevře aplikace a přesměruje vás na příslušné perfuzní spuštění, kde najdete podrobnosti.

4.5.2 Uživatelsky definované notifikace

Kromě notifikací generovaných zařízením umožňuje XVIVO Insights uživatelům konfigurovat vlastní prahové hodnoty notifikací pro vybrané parametry perfuze. Tato funkce umožňuje bližší sledování hodnot, které jsou kritické pro pracovní postup uživatele.



Obrázek 8 - Uživatelsky definované notifikace

Poznámka: Tato funkce je určena výhradně pro pohodlí uživatele a podporu pracovních postupů. Nesmí se používat k hodnocení nebo určování kvality orgánů. Oznámení jsou generována v rámci XVIVO Insights na základě hodnot parametrů přenášených ze zařízení. Nejsou generovány samotným zařízením.

Konfigurace uživatelsky definovaného oznámení:

1. Přejděte na kartu "Data" a vyberte požadované perfuzní spuštění.
2. Vyberte parametr, který chcete sledovat (průtok, tlak, odpor nebo teplota).
3. Klikněte na "Add Threshold" pod grafem.
4. Zadejte minimální a maximální prahovou hodnotu.
5. Klikněte na "Save Threshold".

4.6 Přidání/zobrazení poznámky o perfuzi

Poznámky k perfuzi umožňují přidat komentáře ke konkrétním událostem, ke kterým došlo během perfuzního běhu. Každá nota je spojena s přesným časovým bodem v grafu průběhu.

Přidání poznámky k perfuzi:

1. Klikněte na záložku "Data"
2. Vyberte požadovaný průběh perfuze.
3. Vyberte parametr perfuze (průtok, tlak, odpor nebo teplota) a klikněte na tlačítko "Add note" pod grafem.
4. Pod grafem se zobrazí panel pro vkládání poznámek se dvěma poli:
 - Time: Zadejte čas (hh:mm:ss)
 - Note: Zadejte svůj komentář
5. Klikněte na "Save note" pro uložení záznamu, nebo na "Cancel" pro jeho zahození.

6. Po uložení se poznámky zobrazí v grafu perfuze jako malé modré značky.
7. Kliknutím na "Show notes" zobrazíte všechny přidané poznámky v grafu a kliknutím na "Hide note" je skryjete




Obrázek 9 - Přidat poznámku do grafu

4.7 Přístup k údajům o poloze (pouze zařízení Kidney Assist Transport)

Umístění perfuzního běhu Kidney Assist Transport lze zobrazit v aplikaci XVIVO Insights. Přístup k údajům o poloze:

1. Klikněte na záložku "Data" a vyberte perfuzní běh.
2. Otevře se zobrazení mapy spolu s přehledem parametrů perfuze, zobrazující nejnovější známou polohu vybraného zařízení.
3. GPS data jsou také zahrnuta v excelových reportech pro každý perfuzní běh.

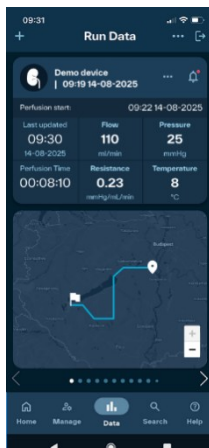

Obrázek 10 - Zobrazit mapu

4.8 Úprava informací o perfuzi

1. V části "Data" vyberte běh perfuze.
2. Klikněte na tři tečky vedle ikony oznámení a vyberte "Detailed info".
3. Chcete-li upravit, klikněte na "Edit information". Dostupné možnosti se budou lišit v závislosti na typu zařízení.
4. Zobrazí se vyskakovací okno s následujícími hodnotami:
 - Information: Upravitelná datová pole.
 - Media: Nahrajte obrázky nebo videa související s postupem.
Do služby XVIVO Insights nenahrávejte osobně identifikovatelné údaje (PII) ani citlivé údaje (například obrázky nebo soubory, které mohou identifikovat osobu).
 - Kliknutím na "Save" aplikujete změny

4.9 Odstranění běhu perfuze

Stará perfuzní běhy lze smazat, pokud již nejsou potřeba. System Users mohou iniciovat žádost o odstranění, která musí být poté zkontrolována a schválena System Manager.

Žádost o vymazání:

5. Vyberte spuštění v části "Data".
6. Klikněte na tři tečky vedle ikony oznámení a vyberte možnost "Request Run Delete".
7. Žádost je odeslána System Manager ke schválení.



Obrázek 11 - Upravit informace o perfuzi

4.9.1 Schválit žádost o odstranění

(dostupné pouze pro System Manager)

1. Přejděte na kartu "Manager".
2. V sekci "Delete requests" vyhledejte požadované spuštění.
3. Zkontrolujte podrobnosti a klikněte na "Delete".

4.9.2 Obnovit odstraněné spuštění perfuze

(dostupné pouze pro System Manager)

1. Přejděte na kartu "Manage".
2. V sekci "Delete requests" vyhledejte spuštění, které chcete obnovit.
3. Zkontrolujte podrobnosti a klikněte na "Restore".
4. XVIVO Admin se odešle žádost ke schválení.

4.10 Udělení přístupu XVIVOTechnical Support

Chcete-li dočasně povolit XVIVO Technical Support zkontrolovat perfuzi:

5. Vyberte spuštění v části "Data".
6. Klikněte na tři tečky vedle ikony odhlášení a vyberte možnost "Give Support Access".
7. Technik z XVIVO získá přístup k prohlížení a exportu dat.

To je užitečné pro účely řešení potíží nebo podpory. Tento přístup lze kdykoli odvolat kliknutím na "Remove support access".


4.11 Stažení zprávy ve formátu PDF/Excel

Reporty jsou ke stažení pro jednotlivá spuštění. Export:

1. Přejděte do části "Data" a vyberte spuštění.

2. Klikněte na tři tečky vedle ikony odhlášení a vyberte možnost "Export Data".
3. Vyberte formát: PDF nebo Excel (xlsx).
4. Zvolte rozlišení dat (např. 10 s, 1 min, 5 min nebo 30 min).
5. Klikněte na tlačítko "Download".

U propojeného PV a HA běhu je zde možnost stáhnout všechna připojená data. To zahrnuje běhy PV a HA, které se časově překrývají ze stejného zařízení, což umožňuje získat kombinovanou zprávu, která představuje úplný obraz o perfuzním sezení jater. Soubory PDF obsahují grafy a poznámky; Zprávy aplikace Excel obsahují souhrn informací o zařízení a průběhu perfuze, data o perfuzi, oznámení a protokoly změn.

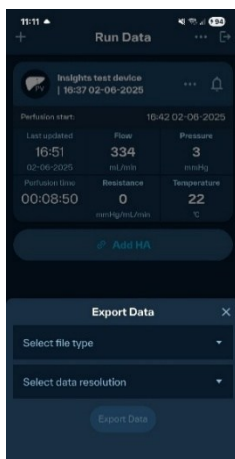

Obrázek 12 - Export dat o perfuzním běhu



Nepoužívejte XVIVO Insights k určení kvality orgánů. To by měl posoudit transplantační chirurg.

4.12 Sekce nápovědy

Karta "Help" poskytuje přístup k podpůrným materiálům:

- About us
- Getting started
- Quick guides
- FAQs
- Troubleshooting guides
- Contact and support information

V případě jakýchkoli technických problémů nebo dotazů se obraťte na tohoto oddíl nebo se obraťte na místního zástupce společnosti XVIVO. Chcete-li si prohlédnout smluvní podmínky služby XVIVO Insights, podívejte se na stránku "About us".

XVIVO B.V.

Bornholmstraat 84
9723 AZ Groningen
The Netherlands

+31(0)50-313 19 05
www.xvivogroup.com
getinsights@xvivogroup.com

ID dokumentu: IFU XVIVO Insights Mobile application cs
Revize: 01
Číslo produktu: 55.607
Rande: 05-02-2026

Titul: Návod k použití

cs

Předmět: XVIVO Insights verze 2.1

18 (18)