

Inštrukcie na používanie

XVIVO Insights™ V2.1 – mobilná aplikácia

XVIVO

Obsah

1	Popis produktu	3
1.1	Upozornenia a opatrenia.....	3
1.2	Účel	3
1.3	Zamýšľaný používateľský profil	3
1.4	Zamýšľaný klinický prínos.....	3
1.5	Zamýšľaná lekárska indikácia	3
2	Podporované operačné systémy	3
3	Úlohy a definície.....	3
4	Inštrukcie na používanie.....	5
4.1	Prihlásenie.....	5
4.2	Úprava názvu zariadenia	6
4.3	Pridanie/úprava používateľov.....	7
4.3.1	Pridanie XVIVO Admin/ XVIVO Technical Support (prístupné iba pre XVIVO Admin).....	7
4.3.2	Pridať System Manager (prístupné iba XVIVO Admin a System Manager).....	7
4.3.3	Pridať System User (prístupné iba pre System Manager).....	8
4.3.4	Pridať Viewer Premium/Viewer	8
4.4	Vyhľadajte perúfúzy beh	8
4.4.1	Prepojenie/odpojenie behu HA s behom PV (iba zariadenia Liver Assist)	10
4.5	Upozornenia	12
4.5.1	Zobrazenie hlásení zo zariadenia	12
4.5.2	Užívateľom definované notifikácie	13
4.6	Pridanie/zobrazenie perúfúzy poznámky.....	13
4.7	Prístup k údajom o polohe (iba zariadenia Kidney Assist Transport)	14
4.8	Úprava informácií o perúfúzii	15
4.9	Odstránenie perúfúzy behu.....	16
4.9.1	Schválenie žiadosti o vymazanie (prístupné len System Manager) .	16
4.9.2	Obnovenie odstráneného behu perúfúzie (prístupné iba System Manager).....	16
4.10	Poskytnite prístup XVIVO Technical Support.....	17
4.11	Stiahnutie zostavy PDF/Excel	17
4.12	Sekcia pomocníka	18

Pozrite si časť "Help" 4.12 pre zmluvné podmienky spoločnosti XVIVO Insights.

1 Popis produktu

XVIVO Insights™ je webová stránka (www.xvivoinsights.com) a mobilná aplikácia používaná na monitorovanie hardvérových perfúzných zariadení XVIVO. Webová stránka a mobilná aplikácia umožňuje vzdialené prezeranie perfúzných údajov, zobrazenie GPS údajov o polohe hardvérového zariadenia.

Údaje o spustení perfúzie sú prístupné prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla. Údaje pre konkrétny beh je možné dočasne zdieľať s personálom XVIVO, aby sa umožnilo vzdialené riešenie problémov.

1.1 Upozornenia a opatrenia

XVIVO Insights nenahrádza rozhranie perfúzneho zariadenia. Nikdy nenechávajte perfúzne zariadenie bez dozoru.

Nepoužívajte XVIVO Insights na určenie kvality orgánov. To by mal posúdiť transplantačný chirurg.

Údaje zobrazené v XVIVO Insights sú určené len na účely monitorovania a nesmú nahrádzať oficiálne sprievodné záznamy alebo dokumentáciu orgánov.

1.2 Účel

XVIVO Insights je webová stránka a mobilná aplikácia určená na doplnkové diaľkové monitorovanie stavu a fungovania perfúzných zariadení XVIVO.

1.3 Zamýšľaný používateľský profil

XVIVO Insights je určený na použitie vyškolenými odborníkmi v profesionálnom zdravotníckom prostredí. Používatelia absolvujú školenie o perfúzných zariadeniach XVIVO pred použitím softvéru XVIVO Insights.

1.4 Zamýšľaný klinický prínos

XVIVO Insights nie je zdravotnícka pomôcka a nemá žiadny klinický prínos.

1.5 Zamýšľaná lekárska indikácia

XVIVO Insights nie je klasifikovaný ako zdravotnícka pomôcka a nemá zamýšľanú lekársku indikáciu.

2 Podporované operačné systémy

Aplikácia XVIVO Insights je k dispozícii pre zariadenia s operačnými systémami iOS a Android. Tieto platformy poskytujú najlepšiu kompatibilitu a používateľskú skúsenosť pre prístup k funkciám aplikácie.

3 Úlohy a definície

Zariadenie je:

fyzické perfúzne zariadenie. Každé zariadenie je zase vo vlastníctve alebo pripojené k individuálnemu účtu kliniky/hubu/OPO. Parametre viditeľné na zariadení sa ukladajú interne v zariadení, kým sa nedosiahne maximálne

Titul: Inštrukcie na používanie

sk

Predmet: XVIVO Insights V2.1

3 (19)

úložisko alebo údaje neodstráni používateľ alebo servisný personál XVIVO. Ak je povolená funkcia XVIVO Insights, údaje sa tiež priebežne nahrávajú do cloudového úložného systému.

System Manager - Má plné administrátorské oprávnenia v rámci spoločnosti:

- Pridávanie a odstraňovanie System Manager a System Users zariadenia registrovaného v spoločnosti (klinika/hub/OPO)
- Pridávanie a odstraňovanie Viewers, XVIVO Admin alebo XVIVO Technical Support do konkrétneho behu perfúzie
- Pozrite si všetky prebiehajúce alebo dokončené perfúzie súvisiace so zariadeniami registrovanými v spoločnosti
- Pridanie alebo úprava údajov textových polí súvisiacich s jednotlivým priebehom perfúzie
- Schválenie žiadosti o vymazanie perfúzných behov
- Žiadosť o obnovenie odstránených behov
- Export údajov spustenia vo formáte PDF alebo Excel

Systém User – prevádzková rola s prístupom k údajom o perfúzii:

- Pridanie alebo odstránenie Viewers , XVIVO Admin alebo XVIVO Technical Support pre jednotlivé behy
- Zobrazíť všetky prebiehajúce/dokončené perfúzie súvisiace so zariadeniami registrovanými na spoločnosť
- Pridanie alebo úprava údajov textových polí súvisiacich s jednotlivým priebehom perfúzie
- Odoslanie žiadostí o odstránenie spustenia (schválené System Manager)
- Export údajov spustenia vo formáte PDF alebo Excel

A Viewer Premium - Zobrazenie + export:

- Zobrazenie spustení explicitne zdieľaných System Manager alebo System User
- Export zostáv PDF alebo Excel pre povolené spustenia

Viewer– základný prístup:

- Zobrazenie iba zdieľaných behov perfúzie

XVIVO Admin - Vyhradené pre interné použitie XVIVO:

- Vytvorte nové spoločnosti a zaregistrujte nové zariadenie do tohto účtu
- Vytvorte všetky používateľské profily vrátane XVIVO Admin, XVIVO Technical Support, System Manager, System User, Viewer Premium a Viewer


XVIVO Technical Support – Úloha riešenia problémov:

- Prístup k správam o spustení a ich stiahnutie po udelení povolenia System Manager alebo System User

4 Inštrukcie na používanie

Spodný navigačný panel pozostáva z piatich kariet:

- Home – prehľad zariadení a ich posledného stavu pripojenia.
- Manage – rozhranie na správu používateľských rolí, priradovanie divákov a spracovanie žiadostí o odstránenie. (Prístupné len pre profily XVIVO Admin a System Manager)
- Run Data – Zobrazenie údajov z predchádzajúcich alebo prebiehajúcich prebiehaní perfúzie.
- Search – Vyhľadávanie perfúzných behov
- Help – poskytuje podrobnosti o prehľadoch, návode na použitie, často kladené otázky, riešenie problémov a kontaktovanie podpory.

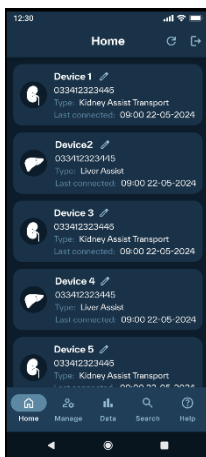

Obrázok 1 - Prehľad prehľadov

Prihlasovacie meno používateľa sa zobrazí v pravom hornom rohu rozhrania spolu s tlačidlom odhlásenia.

4.1 Prihlásenie

1. Otvorte mobilnú aplikáciu XVIVO Insights na svojom zariadení so systémom iOS alebo Android.
2. Zadajte pridelené používateľské meno a heslo
3. Kliknite na tlačidlo "Login" sa

Heslo musí mať minimálne 6 znakov a musí obsahovať aspoň:

- 1 číslica
- 1 malé písmeno
- 1 veľké písmeno
- 1 špeciálny znak

Ak heslo zabudnete, kliknite na tlačidlo "Forgot Password", aby ste dostali odkaz na obnovenie registrovaného e-mailu.

Titul: Inštrukcie na používanie


sk

Predmet: XVIVO Insights V2.1

5 (19)

Uistite sa, že zariadenie má aktívne internetové pripojenie a že povolenia aplikácie umožňujú prístup k sieti.

Z bezpečnostných dôvodov nenechávajte XVIVO Insights otvorené, keď je bez dozoru. Po použití sa vždy odhláste alebo zatvorte aplikáciu.

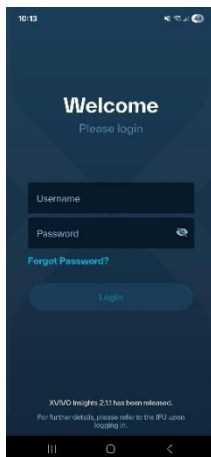


Obrázok 2 - Prihlasovacia stránka

4.2 Úprava názvu zariadenia

Na prispôsobenie alebo jednoduchšiu identifikáciu zariadení v rámci kliniky alebo organizácie môže System Manager a System User aktualizovať predvolený názov zariadenia v aplikácii XVIVO Insights. Postupujte takto :

1. Vyberte kartu "Home" v dolnom navigačnom paneli.
2. V zozname zariadení vyberte ikonu úprav vedľa názvu zariadenia, ktoré chcete aktualizovať.
3. Zadajte nový názov zariadenia.
4. Výberom položky "Save" potvrdíte zmeny.

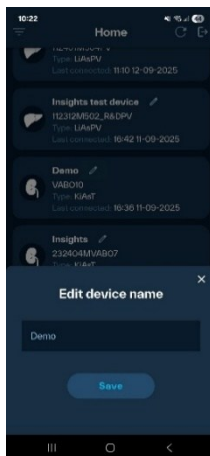

Obrázok 3 - Upraviť názov zariadenia

4.3 Pridanie/úprava používateľov

Správa používateľov v XVIVO Insights je funkcia založená na rolách, ktorá zabezpečuje udelenie správnych úrovní prístupu na základe prevádzkových potrieb. V tejto časti sa dozviete, ako pridať rôzne typy používateľov. Ak chcete vykonať niektorú z nasledujúcich akcií, prejdite na kartu "Manage" a vyberte podkarty "Users".

4.3.1 Pridanie XVIVO Admin/ XVIVO Technical Support (prístupné iba pre XVIVO Admin)

1. Prejdite do sekcie "Manage" > "Users".
2. Kliknite na "Add Users".
3. Zadajte údaje o používateľovi (meno, e-mail).
4. Vyberte rolu: "XVIVO Admin" alebo "XVIVO Technical Support".
5. Priradte používateľa ku konkrétnej spoločnosti.
6. Kliknite na "Add". Používateľ dostane pozvánku s aktivačným e-mailom.

Tieto roly majú zvýšené oprávnenia na správu spoločností, registráciu zariadení a prístup k spusteným údajom, ak to povoľujú používatelia spoločnosti.

4.3.2 Pridať System Manager (prístupné iba XVIVO Admin a System Manager)

1. V sekcii "Manage" > "Users" kliknite na "Add New User".
2. Vyplňte požadované informácie o používateľovi.
3. Vyberte rolu: "System Manager".
4. Priradte používateľa ku konkrétnej spoločnosti (prístupné iba pre XVIVO Admin). System Manager môže vytvoriť ďalšieho System Manager iba v rámci tej istej spoločnosti.
5. Kliknite na "Add". Používateľ dostane pozvánku s aktivačným e-mailom.

System Managers majú plnú kontrolu nad údajmi o zariadeniach a prevádzkach pre svoju organizáciu a môžu spravovať ostatných používateľov.

4.3.3 Pridať System User

(prístupné iba pre System Manager)

1. Prejdite do sekcie "Manage" > "Users".
2. Kliknite na "Add New User".
3. Zadať údaje o používateľovi (meno, e-mail).
4. Vyberte rolu: "System User".
5. Priradte používateľa ku konkrétnej spoločnosti (prístupné iba pre XVIVO Admin). System Manager môže vytvoriť System User iba v rámci tej istej spoločnosti.
6. Kliknite na "Save". Používateľ dostane pozvánku s aktivačným e-mailom.

System Users môžu pristupovať k údajom o perfúzii a upravovať ich, ale nemôžu odstraňovať spustenia ani spravovať iných používateľov.

4.3.4 Pridať Viewer Premium/Viewer

1. V dolnom navigačnom paneli vyberte kartu "Data".
2. Vyberte "+", potom vyberte "Search" a zo zoznamu vyberte perfúzný beh.
3. Kliknite na tri bodky vedľa ikony odhlásenia a vyberte "Manage Viewers" > "Add New Viewer".
4. Vyberte položku "Add".
5. Zadať e-mailovú adresu a priradte rolu Viewer alebo Viewer Premium.

Viewers majú prístup iba k zdieľaným spusteniam, zatiaľ čo Viewer Premium môže tiež exportovať údaje z týchto zdieľaných spustení. Tento prístup je možné kedykoľvek odvolať.

4.4 Vyhľadajte perfúzný beh


Je možné zobrazíť prebiehajúce aj dokončené jazdy. Existujú tri spôsoby, ako nájsť konkrétny priebeh perfúzie v rámci XVIVO Insights:

Možnosť 1: Použitie karty "Data"

1. Kliknite na kartu "Data" v spodnom navigačnom paneli.
2. Vyberte "+" a pomocou dostupných filtrov spresnite vyhľadávanie.

Možnosti filtrovania zahŕňajú:

- Session Start date range (Session start from / to)
 - Device name or serial number
 - Organ ID
3. Po použití filtrov sa zobrazí zoznam zodpovedajúcich spustení.
 4. Výberom spustenia zo zoznamu otvorte jeho podrobné zobrazenie.

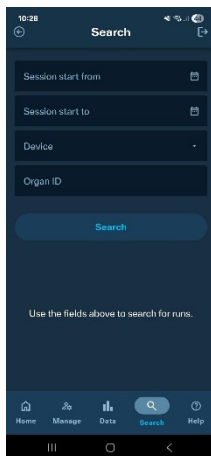


Obrázok 4 - Údaje o spustení vyhľadávania

Možnosť 2: Použitie karty "Home"

1. Na karte "Home" nájdite a vyberte požadované zariadenie zo zoznamu zariadení.
2. Zobrazí sa zoznam nedávnych perfúzií spojených s vybraným zariadením.
3. Výberom konkrétneho spustenia zobrazíte jeho podrobnosti.
4. Toto zobrazenie automaticky použije filter na zobrazenie spustení za posledných 7 dní.

Zobrazia sa iba behy perfúzie spojené so zariadeniami prepojenými s vaším používateľským účtom a úrovňou prístupu.

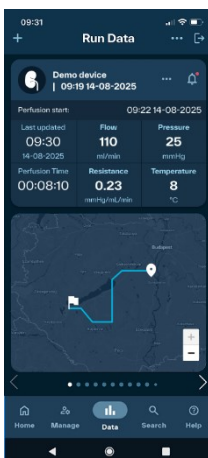

Obrázok 5 - Stránka s údajmi o perfúzií

Titul: Inštrukcie na používanie

sk

Predmet: XVIVO Insights V2.1

9 (19)

Možnosť 3: Použitie karty "Search"

1. Kliknite na kartu "Search" v spodnom navigačnom paneli.
2. Na spresnenie vyhľadávania použite dostupné filtre. Možnosti filtrovania zahŕňajú:
 - Session Start date range (Session start from / to)
 - Device name or serial number
 - Organ ID
3. Po použití filtrov sa zobrazí zoznam zodpovedajúcich spustení.
4. Výberom spustenia zo zoznamu otvorte jeho podrobné zobrazenie.

Je možné otvoriť a zobraziť viacero perfúzných cyklov. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava môžete prepínať medzi otvorenými spusteniami. Ak chcete pridať ďalšie spustenie, kliknite na modrú ikonu "+" a postupujte podľa rovnakých krokov ako v možnosti 1 bez zatvorenia existujúceho spustenia v záložkách. Ak chcete beh uzavrieť, kliknite na tri bodky vedľa ikony zvončeka v pravom hornom rohu záložky behu perfúzie a vyberte možnosť "Remove run".

4.4.1 Prepojenie/odpojenie behu HA s behom PV (iba zariadenia Liver Assist)

V prípade pomôcok Liver Assist sa údaje o perfúzii zaznamenávajú oddelene od dvoch jednotiek: portálnej žily (PV) a pečenej tepny (HA). XVIVO Insights umožňuje používateľom manuálne prepojiť tieto samostatné cykly do jedného kombinovaného zobrazenia, čo je užitočné na kontrolu celej relácie perfúzie pečene.

Prepojenie chodu HA s chodom PV:

1. Prejdite na kartu "Data".
2. Otvorte požadovaný PV chod.
3. Kliknite na "Add HA".
4. Zobrazí sa zoznam neprepojených spustení HA z rovnakého zariadenia.
5. Vyberte chod HA, ktorý zodpovedá PV chodu.



Obrázok 6 - Prepojte PV beh s HA behom

Titul: Inštrukcie na používanie

sk

Predmet: XVIVO Insights V2.1


10 (19)

Po prepojení:

- Chody PV a HA sa zobrazujú spolu na rovnakom grafe perfúzných údajov.
- Prepojené spustenia je možné exportovať ako jeden kombinovaný report (PDF alebo Excel).
- Poznámky a médiá pridané do oboch behov zostanú viditeľné samostatne.

Iba používatelia s rolami System User alebo System Manager môžu prepájať spustenia. Každý PV beh môže byť prepojený iba s jedným HA behom. V exportoch a zobrazeniach tabule sa prepojené chody zobrazujú pod sériovým číslom PV.

Ak chcete odpojiť prevádzku HA od PV prevádzky, prejdite na kartu "Data" a vyberte PV prevádzku. V časti HA kliknite na tri bodky vedľa ikony zvončeka a potom vyberte možnosť "Unlink paired run". Tým sa odstráni spojenie medzi dvoma behmi a obnoví sa PV ako nezávislá relácia v systéme.

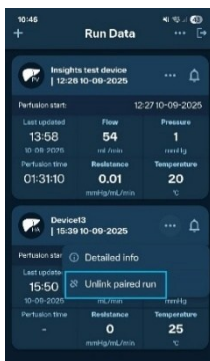

Obrázok 7 - Odpojte PV a HA prevádzku

4.5 Upozornenia



XVIVO Insights nenahrádza rozhranie perfúzneho zariadenia. Nikdy nenechávajte perfúzne zariadenie bez dozoru.





Údaje zobrazené v XVIVO Insights sú určené len na účely monitorovania a nesmú nahrádzať oficiálne sprievodné záznamy alebo dokumentáciu orgánov.

4.5.1 Zobrazenie hlásení zo zariadenia

Upozornenia zahŕňajú chyby, varovania a informačné správy generované zariadením počas perfúzie. Ak ich chcete zobraziť:

1. Prejdite na kartu "Data".
2. Zvoľte požadovaný perfúzny cyklus.
3. Kliknite na ikonu zvončeka.
4. Červená bodka vedľa ikony zvončeka označuje, že existujú neprečítané upozornenia.
5. Posúvajte sa v zozname upozornení. Najnovšie upozornenie sa zobrazí v hornej časti.
6. Každá správa obsahuje časovú pečiatku a úroveň závažnosti (chyba alebo upozornenie).

Oznámenia je možné stiahnuť aj ako súčasť excelovej zostavy na offline analýzu.

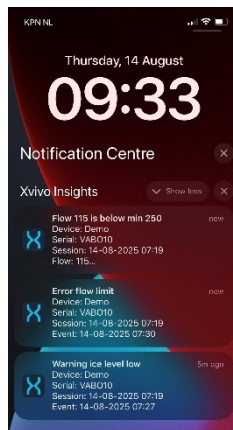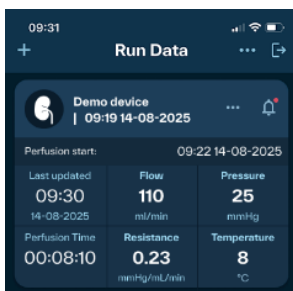

Obrázok 8 - Zobrazenie upozornení

Ak je to povolené v nastaveniach zariadenia, push notifikácie sa odosielať priamo do vášho mobilu. Účet musí byť prihlásený a v aplikácii musí byť otvorený príslušný beh perfúzie, aby ste mohli dostávať upozornenia push. Zvuk a vibrácie push notifikácií sa riadia nastaveniami upozornení vášho mobilného zariadenia. Tieto upozornenia sa zobrazujú ako štandardné systémové upozornenia a poskytujú súhrn udalosti (napr. "Error flow limit"). Klepnutím na upozornenie sa otvorí aplikácia a podrobnosti vás presmeruje na príslušný beh perfúzie.

Titul: Inštrukcie na používanie

sk

Predmet: XVIVO Insights V2.1

12 (19)

4.5.2 Užívateľom definované notifikácie

Okrem upozornení generovaných zariadením umožňuje XVIVO Insights používateľom konfigurovať vlastné prahové hodnoty upozornení pre vybrané parametre perfúzie. Táto funkcia umožňuje bližšie monitorovanie hodnôt, ktoré sú kritické pre pracovný postup používateľa.



Obrázok 9 - Užívateľom definované notifikácie

Poznámka: Táto funkcia je určená výlučne na pohodlie používateľa a podporu pracovného postupu. Nesmie sa používať na hodnotenie alebo určovanie kvality orgánov. Upozornenia sa generujú v rámci XVIVO Insights na základe hodnôt parametrov prenášaných zo zariadenia. Negeruje ich samotné zariadenie.

Ak chcete nakonfigurovať oznámenie definované používateľom:

1. Prejdite na kartu "Data" a vyberte požadovaný priebeh perfúzie.
2. Vyberte parameter, ktorý chcete monitorovať (prietok, tlak, odpor alebo teplota).
3. Kliknite na "Add Threshold" pod grafom.
4. Zadajte minimálnu a maximálnu prahovú hodnotu.
5. Kliknite na "Save Threshold".

4.6 Pridanie/zobrazenie perfúznej poznámky

Perfúzne poznámky umožňujú pridávanie komentárov ku konkrétnym udalostiam, ktoré sa vyskytli počas perfúzie. Každá nota je prepojená s presným časovým bodom v grafe behu.

Pridanie perfúznej noty:

1. Kliknite na kartu "Data"
2. Zvoľte požadovaný perfúzny cyklus.

Titul: Inštrukcie na používanie

sk

Predmet: XVIVO Insights V2.1

13 (19)

3. Vyberte parameter perfúzie (prietok, tlak, odpor alebo teplota) a kliknite na tlačidlo "Add note" pod grafom.
4. Pod grafom sa zobrazí panel na zadávanie poznámok s dvoma poľami:
 - Time: Zadajte čas (hh:mm:ss)
 - Note: Zadajte svoj komentár
5. Kliknite na "Save note" pre uloženie položky alebo "Cancel" pre jej zahodenie.
6. Po uložení sa poznámky zobrazia ako malé modré značky v grafe perfúzie.
7. Kliknutím na "Show notes" zobrazíte všetky pridané poznámky v grafe a "Hide notes" ich skryjete.




Obrázok 10 - Pridanie poznámky do grafu

4.7 Prístup k údajom o polohe (iba zariadenia Kidney Assist Transport)

Umiestnenie perfúzneho cyklu Kidney Assist Transport si môžete pozrieť v aplikácii XVIVO Insights. Prístup k údajom o polohe:

1. Kliknite na kartu "Data" a vyberte priebeh perfúzie.
2. Otvorí sa zobrazenie mapy spolu s prehľadom parametrov perfúzie, ktoré zobrazuje najnovšiu známu polohu vybraného zariadenia.
3. Údaje GPS sú tiež zahrnuté v excelových zostavách pre každý beh perfúzie.

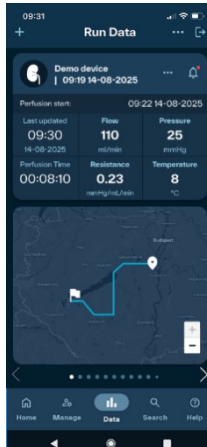

Obrázok 11 - Zobrazit' mapu

4.8 Úprava informácií o perfúzii

1. V sekcii "Data" vyberte priebeh perfúzie.
2. Kliknite na tri body vedľa ikony upozornenia a vyberte "Detailed info".
3. Ak chcete upraviť, kliknite na "Edit information". Dostupné možnosti sa budú líšiť v závislosti od typu zariadenia.
4. Zobrazí sa vyskakovacie okno z:
 - Information: Upraviteľné dátové polia.
 - Media: Nahrajte obrázky alebo video súvisiace so zákrokom. **Nenahrávajte osobné údaje (PII) ani citlivé údaje** (ako sú obrázky alebo súbory, ktoré môžu identifikovať osobu) do XVIVO Insights.
 - Kliknutím na "Save" použijete zmeny



Obrázok 12 - Upraviť informácie o perfúzií

4.9 Odstránenie perfúzneho behu

Staré perfúzne behy je možné vymazať, ak už nie sú potrebné. System Users môžu iniciovať žiadosť o vymazanie, ktorú potom musí skontrolovať a schváliť System Manager.

Ak chcete požiadať o odstránenie:

1. Vyberte spustenie v sekcii "Data".
2. Kliknite na tri bodky vedľa ikony upozornenia a vyberte možnosť "Request Run Delete".
3. System Manager sa odošle žiadosť na schválenie.

4.9.1 Schválenie žiadosti o vymazanie

(prístupné len System Manager)

1. Prejdite na kartu "Manage".
2. V sekcii "Delete Requests" vyhľadajte požadované spustenie.
3. Skontrolujte podrobnosti a kliknite na "Delete".

4.9.2 Obnovenie odstráneného behu perfúzie

(prístupné iba System Manager)

1. Prejdite na kartu "Manage".
2. V sekcii "Delete Request" nájdite spustenie, ktoré chcete obnoviť.
3. Skontrolujte podrobnosti a kliknite na "Restore".
4. Žiadosť je odoslaná XVIVO Admin na schválenie.

4.10 Poskytnite prístup XVIVO Technical Support

Ak chcete dočasne povoliť XVIVO Technical Support skontrolovať perfúziu:

1. Vyberte spustenie v sekcii "Run Data".
2. Kliknite na tri bodky vedľa ikony odhlásenia a vyberte možnosť "Give support access".
3. Technik z XVIVO získa prístup k prezeraniu a exportu údajov.


Je to užitočné na účely riešenia problémov alebo podpory. Tento prístup je možné kedykoľvek zrušiť kliknutím na "Remove support access".

4.11 Stiahnutie zostavy PDF/Excel

Reporty sú na stiahnutie pre jednotlivé behy. Export:

1. Prejdite na "Run Data" a vyberte spustenie.
2. Kliknite na tri bodky vedľa ikony odhlásenia a vyberte možnosť "Export Data".
3. Vyberte formát: PDF alebo Excel (xlsx).
4. Vyberte rozlíšenie dát (napr. 10 s, 1 minúta, 5 minút alebo 30 minút).
5. Kliknite na "Download".

Pre prepojený chod PV a HA je tu možnosť stiahnuť všetky pripojené dáta. To zahŕňa PV a HA behy, ktoré sa časovo prekrývajú z toho istého zariadenia, čo umožňuje kombinovanú správu, ktorá predstavuje úplný obraz o perfúznom sedení pečene. Súbor PDF obsahuje tabuľky a poznámky; Excelové zostavy obsahujú súhrn informácií o zariadení a perfúzií, údaje o perfúzií, oznámenia a denníky zmien.

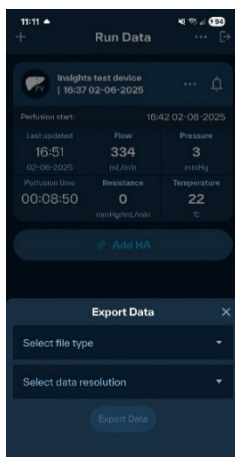

Obrázok 13 - Export údajov o perfúzií



Nepoužívajte XVIVO Insights na určenie kvality orgánov. To by mal posúdiť transplantačný chirurg.

Titul: Inštrukcie na používanie

sk

Predmet: XVIVO Insights V2.1

17 (19)

4.12 Sekcia pomocníka

Karta "Help" poskytuje prístup k podporným materiálom:

- About us
- Getting started
- Quick guides
- FAQs
- Troubleshooting guides
- Contact and support information

V prípade akýchkoľvek technických problémov alebo otázok si pozrite túto časť alebo kontaktujte miestneho zástupcu XVIVO. Ak si chcete pozrieť zmluvné podmienky pre XVIVO Insights, pozrite si stránku "About us".

XVIVO B.V.

Bornholmstraat 84
9723 AZ Groningen
The Netherlands

+31(0)50-313 19 05
www.xvivogroup.com
getinsights@xvivogroup.com

ID dokumentu: IFU XVIVO Insights Mobile application sk
Revízia: 01
Číslo výrobku: 55.608
Dátum: 05-02-2026

Titul: Inštrukcie na používanie

sk

Predmet: XVIVO Insights V2.1

19 (19)